



MANUAL DEL USUARIO DE VASINDUX HOME

Terapia De Campo Electromagnético Pulsado



Versión 2.0

Manual del usuario de Vasindux Home Series

- 4 Introducción
- 4 Incluido Con Su Compra
- 4 Consejos De Aplicación Para Mejores Resultados
- 5 Información Importante Sobre La Terapia PEMF
- 6 Inicio Rápido De Vasindux Home**
- 8 Configuración Y Uso De Vasindux Home
- 10 Función De Sonido / Contraste De Pantalla Personalizado
- 11 Programación - PR 13
- 12 Preguntas Más Frecuentes
- 13 Información Del Programa
- 15 Beneficios Del Uso Regular De La Terapia PEMF
- 16 Limpieza
- 16 Declaración Medioambiental
- 16 Fabricante Y Servicio De Garantía
- 17 Especificaciones Técnicas
- 18 Declaración De Garantía

Introducción

Gracias por elegir la terapia de campo electromagnético pulsado (PEMF). Los productos Vasindux Home son uno de los dispositivos electromagnéticos pulsados más actualizados para uso doméstico. Este dispositivo tiene características innovadoras diseñadas para mejorar la salud general, el bienestar y mejorar su calidad de vida.

Este manual de usuario está diseñado para ayudarle a utilizar la unidad Vasindux Home de forma segura y eficaz para lograr los mejores resultados.

Incluido Con Su Compra

Controlador, adaptador de CA, aplicador y manual de instrucciones

Consejos De Aplicación Para Mejores Resultados

Se recomienda a las personas con dolor crónico intenso u otras preocupaciones fisiológicas que comiencen la terapia con PEMF a niveles de baja frecuencia y luego aumenten gradualmente con el tiempo según lo deseen. Los efectos secundarios de la terapia con PEMF suelen ser menores y temporales, si es que ocurren. En algunos casos, los usuarios experimentan mareos u hormigueo debido a la hipersensibilidad a los campos electromagnéticos. En la mayoría de los casos, cambiar las frecuencias utilizadas y reducir el nivel de potencia en el dispositivo PEMF resolverá estos asuntos.

- No se recomienda beber bebidas con cafeína ni fumar inmediatamente antes y después del uso del dispositivo, ya que la nicotina y la cafeína restringen los vasos sanguíneos.
- Se recomienda mantenerse adecuadamente hidratado. Beba un vaso de agua antes y después de su sesión de terapia.
- Evite las dietas poco saludables. Asegúrese de llevar una dieta nutritiva con frutas y verduras frescas. Para una máxima eficiencia, use el dispositivo con regularidad.

Información Importante Sobre La Terapia PEMF

Quién Debe Utilizar Los Dispositivos PEMF?

Personas que: Están experimentando afecciones dolorosas, desean mejorar y mantener su salud en general o si se están recuperando de una lesión.

Quién No Debe Utilizar Los Dispositivos PEMF?

El uso de un producto PEMF está contraindicado en personas con marca-pasos u otros implantes electrónicos, implantes cocleares o válvulas cardíacas mecánicas, a menos que lo apruebe el fabricante del dispositivo. Los productos PEMF también están contraindicados durante el embarazo y en personas con epilepsia o sangrado. La terapia con PEMF está contraindicada para los receptores de trasplantes de órganos, los que reciben terapia inmuno-supresora y las personas con DIU que no son seguros para la resonancia magnética.

En algunas personas pueden producirse reacciones menores a la terapia con PEMF de baja intensidad y es parte del proceso de desintoxicación y curación. Debido a que la terapia PEMF da como resultado muchas actividades dentro del cuerpo, algunas personas pueden experimentar una leve molestia, especialmente cuando la usan por primera vez. Las frecuencias más bajas de 1 a 12 Hz tienen menos probabilidades de causar una reacción negativa y son óptimas para el bienestar general.

Los efectos secundarios de la terapia PEMF generalmente son inexistentes o muy leves y temporales, pero pueden observarse en usuarios que son hipersensibles a los campos electromagnéticos. La mayoría de las veces, cambiar las frecuencias utilizadas en el dispositivo PEMF ayudará a resolver cualquier problema. Es muy importante beber al menos 8-10 onzas de agua pura antes y después de una sesión de PEMF. Las personas que tienen dolor crónico severo u otras preocupaciones fisiológicas, se sugiere comenzar la terapia PEMF a niveles de frecuencia baja (como 1,2,3, 4 o 5 Hz) y luego aumentar hasta 12 Hz.

El apoyo y los suplementos nutricionales adecuados también son útiles junto con la Terapia PEMF.

Inicio Rápido De Vasindux Home

El controlador Home está diseñado para iniciar rápidamente los programas principales de **Energía**, **Relajación** y **Sueño**. Al seleccionar los accesos directos **I**, **II** o **III**, los programas se inician inmediatamente.

Presione el botón "Encendido" para encender el dispositivo. El logotipo de Vasindux aparecerá brevemente en la pantalla.



Una vez que se muestra PR1 (Programa 1) en la pantalla, puede seleccionar cualquiera de los 3 valores predeterminados para iniciar el programa inmediatamente. ¡Relájate y disfruta de tu sesión de bienestar!



I (Energía), **II (Relajarse)** o **III (Dormir)**

Durante el funcionamiento, el controlador muestra el programa que ha seleccionado, el tiempo restante para su sesión y la forma de onda. La simulación indica si el programa seleccionado usa onda sinusoidal o cuadrada.

Para establecer la configuración predeterminada del controlador, mantenga presionadas las flechas izquierda y derecha simultáneamente. El área de configuración le permite seleccionar el sonido, el contraste, la intensidad y el tiempo predeterminados. Una vez que establezca cada categoría, esas configuraciones se utilizarán como configuraciones predeterminadas cuando inicie un programa

I - El programa Energy le da a su mente y cuerpo estimulación que ayuda a mejorar su energía y estado de ánimo.


II - El programa Relajarse proporciona un conjunto relajante de frecuencias terrestres para relajar la mente y los nervios mientras proporciona estimulación celular.

III - El programa de Dormir ayuda a preparar su mente y cuerpo para un sueño profundo mientras recarga suavemente sus células.

Energía

I, II y III

OK

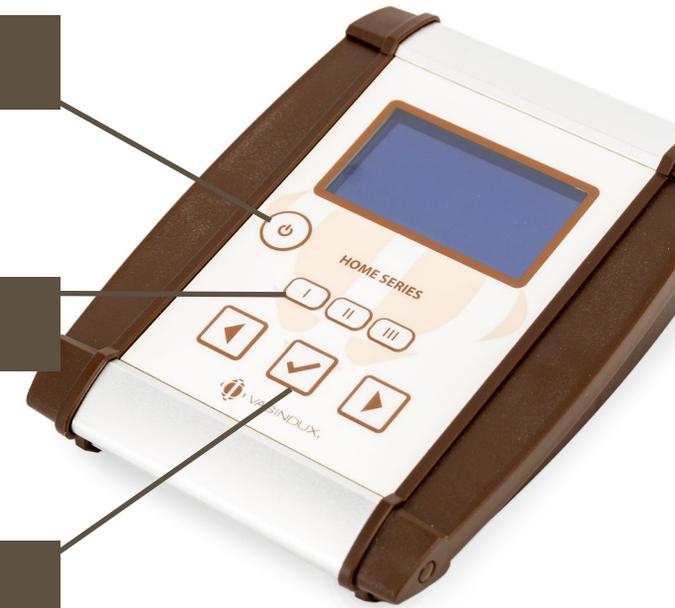

Presione el botón OK durante la operación para pausar la sesión. Para continuar la sesión, presione el botón OK una vez más. Puede presionar el botón de encendido en cualquier momento para finalizar la sesión. Puede presionar y mantener presionado el botón de encendido para apagar el controlador.

Al final de la sesión, se emitirá un breve pitido doble. (Si la opción de sonido está activada) La palabra STOP aparecerá en la pantalla. Si el controlador no se usa durante cinco minutos, se apagará automáticamente

Configuración Y Uso De Vasindux Home

El controlador es liviano y fácil de usar. Conecte el adaptador de CA a su toma corriente. Asegúrese de que el adaptador de CA y el aplicador estén bien conectados al controlador.


Presione el botón de Encendido (1) para encender el dispositivo. El logotipo de Vasindux aparecerá brevemente en la pantalla.



Una vez que se muestra PR1 en la pantalla, use los botones de flecha izquierda y derecha (2) para desplazarse por las 13 opciones de programa. Presione el botón OK (3) para confirmar su selección. (Mantenga presionado para ajustar el tiempo o la intensidad si es diferente de la configuración predeterminada).



Cuando se muestre la imagen que se asemeja a un gráfico de barras, use la flecha derecha para aumentar la intensidad o la flecha izquierda para disminuir la intensidad. Luego presione OK.

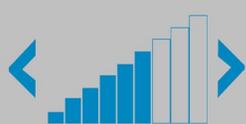

Una vez que haya seleccionado la intensidad deseada, puede personalizar el tiempo. Cuando aparezca la imagen con el símbolo del reloj, puede desplazarse hacia la derecha y hacia la izquierda usando los botones de flecha para elegir la hora. Presione OK para comenzar la sesión.




Durante el funcionamiento, el controlador muestra el programa que ha seleccionado, el tiempo restante para su sesión y la forma de onda. La línea curva indica que el programa seleccionado utiliza la onda sinusoidal. Los programas que utilizan la onda cuadrada mostrarán una onda cuadrada animada.



(1) Energía

(2) I + D

(3) OK

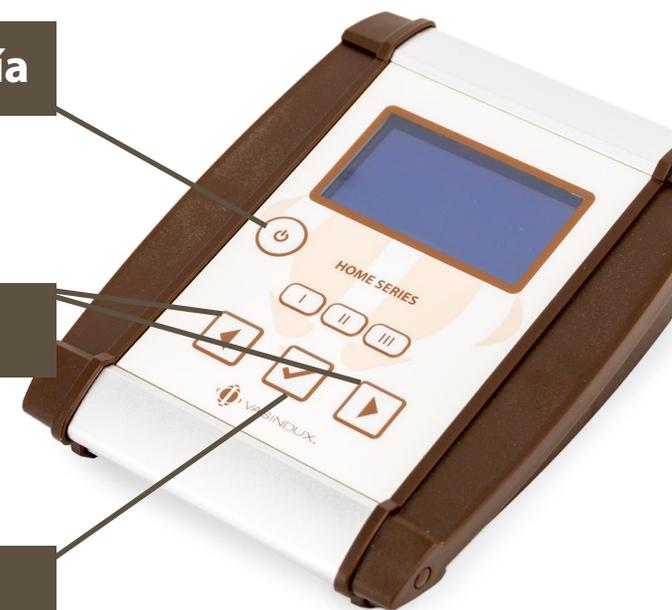

Presione el botón OK durante la operación para pausar la sesión. Para continuar la sesión, presione el botón OK una vez más. Puede presionar el botón de encendido en cualquier momento para finalizar la sesión. Puede presionar y mantener presionado el botón de encendido para apagar el controlador.

Al final de la sesión, se emitirá un breve pitido doble. (si la opción de sonido está activada) La palabra STOP aparecerá en la pantalla. Si el controlador no se usa durante cinco minutos, se apagará automáticamente.

Funciones De Sonido

Sonido activado: El Vasindex omite un pitido que indica el comienzo y el final de una sesión.



Sonido desactivado: Para desactivar la función de sonido, mantenga presionados ambos botones de flecha simultáneamente. Use los botones de flecha para encender y apagar el sonido o para ajustar el volumen del pitido.




Contraste De Pantalla

Mantenga presionados ambos botones de flecha simultáneamente. Utilice los botones de flecha para encontrar el símbolo de contraste. Presione OK.



Utilice los botones de flecha para ajustar el contraste. Presione OK para confirmar su selección. Presione el botón de encendido para salir del menú de configuración.

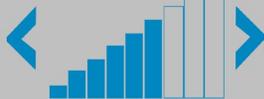

Programa Personalizado PR 13

El programa 13 permite al usuario personalizar configuraciones específicas para su programa. Utilice las flechas para desplazarse por los programas hasta que vea <Pr13> en la pantalla. Presione OK para confirmar su selección. Tendrá la opción de seleccionar una frecuencia específica.

Utilice las teclas de flecha para seleccionar el primer dígito. Presione OK para confirmar la selección.



Utilice las teclas de flecha para seleccionar el segundo dígito. Presione OK para confirmar la selección.




A continuación, use las teclas de flecha para seleccionar su tercer dígito. Presione OK para confirmar la selección.



Ahora tienes la opción de seleccionar la polaridad. El +/- indica polaridad inversa. - / - es polaridad negativa y + / + es polaridad positiva. Presione OK para confirmar su selección.



Cada una de las barras representa la intensidad. Puede utilizar los botones de flecha para ajustar la intensidad de su sesión. Presione OK para confirmar su selección.

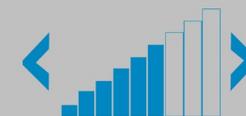

Por último, establezca la hora. Utilice los botones de flecha para ajustar el tiempo de su sesión. El tiempo es ajustable en intervalos de diez minutos. Presione OK para comenzar su sesión.



Preguntas Más Frecuentes

¿Qué Es La Intensidad?


La intensidad es la fuerza de la señal. La intensidad se mide en Gauss o MicroTesla.

¿Qué Es La Frecuencia?

La frecuencia es el número de pulsos que se emiten por segundo. La frecuencia se mide en hercios.


¿Qué Es La Forma De Onda?

La forma de onda es la forma de la onda magnética.

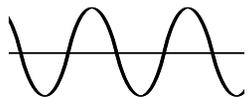

Onda Sinusoidal

Existe una variedad de formas de onda en la naturaleza, en el cuerpo y en los dispositivos PEMF. La onda sinusoidal imita las ondas que el cuerpo emite de forma natural.

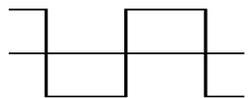

Onda Cuadrada

Por el estudio de la NASA, sabemos que la onda cuadrada es ideal para romper los ciclos de dolor y promover la curación y regeneración de tejidos sanos.

¿Con qué programa debo comenzar?

Sus primeras sesiones deben ser uno de los programas de menor frecuencia. Pruebe un programa bajo con la intensidad predeterminada hasta que su cuerpo se adapte a la terapia.

¿En cuánto tiempo se tarda en ver los resultados?

Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar el dispositivo dos veces al día. Cada persona responde de manera diferente a la Terapia PEMF. Los resultados pueden variar de forma individual. Es importante saber que la Terapia PEMF es una terapia complementaria y no un tratamiento médico. Si tiene problemas de salud específicos, comuníquese con su médico.

Información Del Programa

Programas Generales	Forma De La Onda	Frecuencia	Notas
Programa 1	Seno	12-22 Hz	Energía
Programa 2	Seno	8-11 Hz	Relajarse
Programa 3	Seno	0.5-5 Hz	Dormir
Programa 4	Cuadrado	12-22 Hz	Energía
Programa 5	Cuadrado	8-11 Hz	Relajarse
Programa 6	Seno	15.6 Hz	Ver Guía De Programas
Programa 7	Seno	65.5 Hz	Ver Guía De Programas
Programa 8	Cuadrado	15.6 Hz	Ver Guía De Programas
Programa 9	Seno y Cuadrado	26Hz/15Hz	Ver Guía De Programas
Programa 10	Seno	7.8, 14, 20.8, 25 & 31 Hz	Ver Guía De Programas
Programa 11	Seno	396, 417, 528, 639, 741, 852, 963 Hz	Chakra Completo
Programa 12	Seno	110, 117.3, 164.3, 176, 220, 281, 295.8, 315.8, 317.83, 319.88, 321.9, 324, 355.2, 418.3 & 492.8 Hz	Bio Resonancia Completa
Programa 13	Seno	0.1 - 99.9	Personalizado

Series Home



Tapete De Cuerpo Entero

Este dispositivo se utiliza para terapia de cuerpo completo y bienestar general.



Accesorio De Anillo

Este dispositivo se utiliza para la cabeza, el cuello, las articulaciones y las extremidades.



Accesorio De Tapete Para Silla

Use este dispositivo en una silla, en una cama o en la oficina.

Beneficios Del Uso Regular De La Terapia PEMF

- Reducción del dolor y curación acelerada
- Promueve la salud celular para mejorar el bienestar.
- Mejora la capacidad de auto curación y la calidad de vida del cuerpo.
- Aumenta la energía y el rendimiento deportivo.
- Mejora la circulación, la oxigenación y la inmunidad.
- Mejora la desintoxicación y eliminación.
- Mejora el sueño, la reducción del estrés y la función cognitiva.
- Modula la respuesta inflamatoria, reduce el estrés oxidativo, promueve el rejuvenecimiento celular
- No tóxico

Limpieza

La superficie de su dispositivo no es lavable. No limpie con productos químicos agresivos. La suciedad leve debe eliminarse con un paño seco. Se recomienda cubrir el tapete para proteger la superficie.

Cuero PU: Limpie el aplicador con agua tibia o un detergente suave con un paño húmedo. No limpiar con químicos.

Declaración Medioambiental

Los equipos eléctricos usados se consideran desechos peligrosos. Recicle este producto en consecuencia. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor

Fabricante Y Servicio De Garantía

FABRICANTE

Vasindex, LLC
Mifflintown, Pennsylvania, USA
UU. Fabricado en Hungría

Servicio De Garantía

Cumplido por el distribuidor.

Hay una garantía de tres años para los productos Vasindex PEMF a partir del día de la compra. Sin embargo, no es válido en los siguientes casos:

- Fallo o daño debido a un uso inadecuado
- Daños y contaminación del colchón provocados por una protección inadecuada
- Si el controlador o el adaptador se han abierto durante el período de garantía

Especificaciones Técnicas

ENTRADA	AC100 - 240V - 50/60 Hz
SALIDA	12V CC - 2.5 Amperios - 30 Vatios Máx
TIPO DE BOBINA	Tapete: 8 Bobinas De Cobre Tapete Para Silla: 6 Bobinas De Cobre Anillo: 1 Bobina Grande
FORMA DE LA ONDA	Seno o Cuadrado
INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO	Tapete Completo: 5 - 75 Microtesla (.05 - 0.75G) Tapete Para Silla: 5 - 75 Microtesla (.05 - 0.75G) Anillo: 5 - 180 Microtesla (.05 -1.8 G)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	Entre 35 F y 104 F Humedad relativa del aire hasta 75%
RANGO DE FRECUENCIA	Programas Preestablecidos: 0.5 - 963 Hz Programa Personalizado: 0.1 - 99.9 Hz
MATERIAL	Tapete Completo: Algodon Poli Tapete Para Silla: Algodon Poli Anillo: Ceuro PU
TAMAÑOS	Tapete Completo: 70 X 27 In (180 X 70 cm) Tapete Para Silla: 18 X 39 In (46 X 99 cm) Anillo: 9 In DI (22 cm DI)
PESO	Tapete Completo: 7 lbs (3.17Kg) Tapete Para Silla: 2.1 Lbs (.95 Kg) Anillo: 1.8 Lbs (.81 Kg) Controlador: 1 Lb (.45kg)

Declaración De Garantía

Vasindex garantiza que cada nuevo producto PEMF está libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de tres (3) años después de la venta del producto Vasindex al comprador original

La obligación de Vasindex bajo esta garantía está expresamente limitada única y exclusivamente a la reparación o reemplazo de la unidad o cualquier parte de la misma, que a la satisfacción de Vasindex, se han vuelto defectuosos durante el período de garantía, y que deberá haber sido devuelto a Vasindex dentro de los 5 días hábiles posteriores al descubrimiento del defecto por parte del comprador original. Esta garantía no se extiende a ninguna responsabilidad por gastos médicos, o por cualquier otro defecto o mal funcionamiento del producto "Vasindex", excepto según lo dispuesto en el presente, ya sea que dicha reclamación por daños se base en contrato, agravio, incumplimiento de la garantía o de otro modo. Esta garantía no se aplicará a ningún producto "Vasindex" que haya sido reparado, manipulado o alterado por alguien que no sea un representante de Vasindex debidamente autorizado, o que haya sido sometido a negligencia, accidente, mal manejo, desgaste normal o que no sido utilizado de acuerdo con las instrucciones adjuntas o para los propósitos indicados. Esta garantía se limita expresamente y únicamente al comprador (usuario) original y no se extiende a ningún cesionario o comprador o usuario posterior del producto "Vasindex".

Esta garantía es la única y exclusiva garantía otorgada o que se puede considerar otorgada por Vasindex y reemplaza expresamente cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Ninguna persona o entidad tiene autoridad para obligar a Vasindex a ninguna garantía o representación, excepto según lo establecido específicamente en este documento.



**Desarrollar productos de bienestar de alta
calidad y tecnológicamente avanzados
que brinden valor a largo plazo.**

Derecho Del Autor © 2020 Vasindux

www.vasindux.com